

ONE SHADING MEETS BULK FILLING



NEW

Charisma Bulk Flow ONE.

Pirmais plūstošais vienas krāsas vienas porcijas kompozīts ikdienas darbam.

Vienmēr istā krāsa: ar lieliskām krāsas pielāgošanās īpašībām Charisma Bulk Flow ONE restaurācijas kļūst neredzamas, jo saplūst ar apkārtējiem zoba audiem.

Ērta lietošana: kavitātes tiek aizpildītas viegli un ātri vienā porcijā līdz 4 mm bez obligāta papildus virsslāņa.

Ilgstošas restaurācijas: zems saraušanās stress, augsta lieces izturība, zems nodilums – tas viss nodrošina ilgtermiņa restaurācijas, kas būs noturīgas pret abrāziju un košanas slodzi posterior rajonā.



Izmēģiniet paši: kulzer.com/try-charisma-bulk-flow-one



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

4
3
2
1
0
mm

ONE LAYER FOR ALL SHADES




Charisma Bulk Flow ONE vienkāršo un racionalizē restaurācijas procesu.

Charisma Bulk Flow ONE apvieno plūstoša materiāla pašlīdzinošo efektu ar augstu cietēšanas slāņa dziļumu un stabilitāti pēc aplicēšanas. Tas ļauj kavitātē ievietot līdz 4 mm materiāla.


Ar Charisma Bulk Flow ONE var samazināt darba veikšanas laiku, jo nav jāizvēlas krāsa un nevajag aplicēt virsslāni no tradicionālā kompozīta.

Materiālam ir ļoti plašs indikāciju spektrs – var lietot gan kā odeses slāni kompozīta, gan kā pastāvīgo restaurācijas materiālu, ideāls arī piena zobu labošanai vienā porcijā. Ātrs un efektīvs restaurāciju procesa nodrošinājums būs kopā ar uzticamu adhezīvu Gluma Bond Universal.

LIETOJUMU DAUDZPUSĪBA

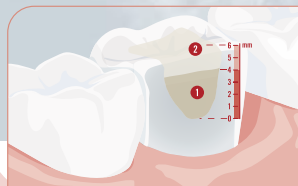

BULK & BODY TECHNIQUE:
 1 Charisma Bulk Flow ONE
 2 + e.g. Charisma Diamond/Topaz

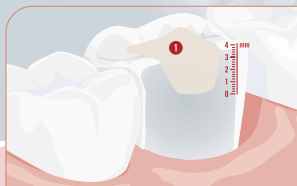

BULK PILDĪŠANAS TEHNIKA:
 1 Charisma Bulk Flow ONE

EFEKTĪVA APSTRĀDE



Ekskavēta un preparēta kavitāte, izolācija ar koferdamu.



Klīniskā situācija pēc 4 nedēļām.



X-ray control:
 Very good radiopacity of Charisma Bulk Flow ONE

Art. code	Package	Content
-----------	---------	---------

Charisma Bulk Flow ONE – šīrces

66094725	CHARISMA BULK FLOW ONE SYR 1x2G	1 x 2 g šīrces 5 x kanulas Instrukcija
----------	---------------------------------	--

Charisma Bulk Flow ONE – Value Packs

66095336	Charisma BULK FLOW ONE VALUE-KIT SYRINGE	10 x 2 g šīrces 10 x 5 kanulas 1 x darba karte Instrukcija
----------	--	---



Discover our new ONE: kulzer.com/try-charisma-bulk-flow-one

Akcijas preces var iegādāties tikai pie Kulzer GmbH oficiālajiem dīleriem:

Oficiālie dīleri Latvijā:

SIA DABdental
 SIA Magnum medical
 SIA Plandent
 AS Recipe Plus
 SIA Thomas Freiberg
 SIA Dentoflex Schumann

Kulzer Nordic AB pārstāvis Latvijā
 Dr. Irena Delle
 +371 29284100
 irena.delle@kulzer-dental.com
 www.kulzer.com



KULZER
 MITSUI CHEMICALS GROUP

Giving a hand to oral health.