



# Spēcīgs līdz kodolam

everX Flow™  
no GC

Īso šķiedru plūstošais  
kompozīts dentīna  
aizvietošanai

**GC**



Since 1921  
100 years of Quality in Dental

# everX Flow no GC

## Spēcīgs līdz kodolam


Iepazīstiet **everX Flow**- ar īsām šķiedrām stiprinātu plūstošo kompozītu, kas paredzēts **dentīna aizvietošanai un restaurāciju stiprināšanai**. everX Flow pievienoto stikla šķiedru princips ir līdzīgs celtniecībā pielietotajām metāla konstrukcijām; stikla šķiedras stiprina restaurāciju un **pasargā no plaisāšanas**.

everX Flow, pateicoties vieglai aplikācijai, divu krāsu izvēlei un izcilam stiprumam, kļūst par jūsu **izvēles kompozītu visās restaurācijās, kad nepieciešams stiprs kodols**, kā arī veikt zoba stumbra atjaunošanu.



### Izcila lūzumizturība izturīgām plašām restaurācijām

Lielākai daļa kompozītmateriālu ir perfekti piemērotas īpašības emaljas aizvietošanai- augsta nodilumizturība un laba estētika. Tomēr to lūzumizturība nav līdzvērtīga dentīna spējām pretoties plaisāšanai. everX Flow pārvar šo trūkumu un tam, pateicoties lielumam daudzumam īso šķiedru, kas cieši savienotas ar sveķu matricu, ir izcila dentīnam **līdzīga lūzumizturība**. Tādēļ tas apvienojumā ar emaljas aizvietošanai izmantoto standarta kompozītmateriālu, **efektīvi stiprina plašās sānu zobu restaurācijas**.

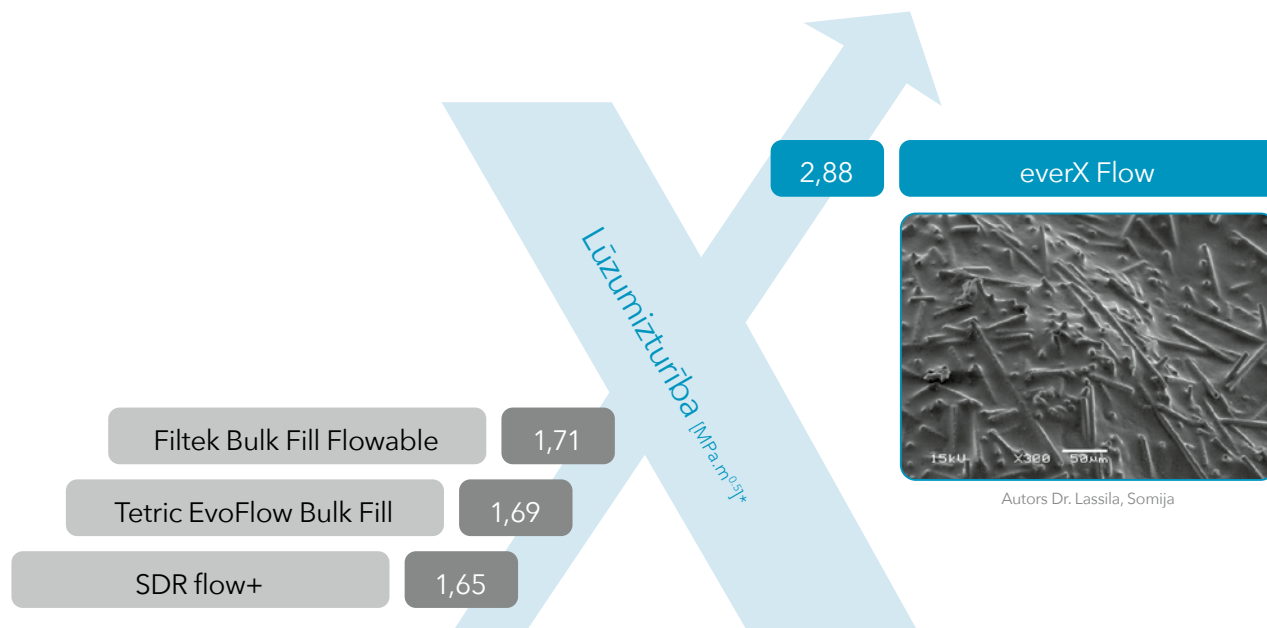


Avots: GCC R&D - dati pieejami pēc pieprasījuma.  
Tests veikts pēc ASTM E399-90 (1997).

# Perfektas tiksotropās īpašības atvieglo aplikāciju un nodrošina izcilu adaptāciju



Autors  
Dr Javier Tapia Guadix, Spānija

everX Flow, pateicoties optimālām tiksotropām spējām palīdz izvairīties no **poru veidošanās, tas viegli adaptējas jebkuras formas preparācijai.** Tā kontrolētā plūstamība neveido notecējumus un ļauj veiksmīgi to izmantot augšžokļa molāros.

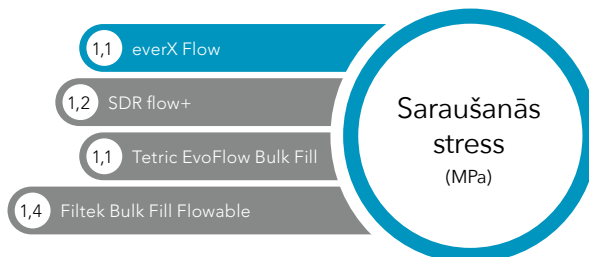

Avots: GCC R&D - dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Divas krāsas dažādām vajadzībām

**Bulk**  
(tilpuma)  
krāsa  
Polimerizācijas  
dziļums  
5.5 mm

Piemērota **dziļās sānu zobu kavitātēs**

**Dentīna**  
krāsa  
Polimerizācijas  
dziļums  
2.0 mm

Piemērota **estētiskiem klīniskajiem gadījumiem un stumbra atjaunošanai**

## Optimāli stiprina plašas kavitātes un nodrošina ilgtermiņa estētisko rezultātu



Kavitātes preparācija



everX Flow aplikācija (dentīna krāsa)



Pēdējais slānis ar **Essentia** (universālā krāsa)



Postoperatīvā situācija

Autors Georg Benjamin,  
Vācija



Kavitātes preparācija



everX Flow aplikācija (Bulk krāsa)



Pēdējais slānis ar **G-enial Universal Injectable** (A3 krāsa)



Postoperatīvā situācija

Autors Dr. Lucile Dahan,  
Francija



# everX Flow no GC

## Spēcīgs līdz kodolam



Bulk  
(tilpuma)  
krāsa  
dziļām  
kavitātēm

Dentīna  
krāsa  
estētiskam  
rezultātam

everX Flow

012898 everX Flow, šļirce 2 ml (3.7g) Bulk

012899 everX Flow, šļirce 2 ml (3.7g) Dentīns



Sagatavojiet kavitāti



II klases kavitātē vispirms ar standarta kompozītmateriālu atjaunojiet trūkstošo sienu



Aizpildiet kavitāti ar everX Flow



Gala rezultāts, pēdējā slāņa atjaunošanai izmantojot standarta kompozītmateriālu

## Iepazīstiet arī



G-Premio BOND  
Universālais adhezīvs



G-aenial Universal Injectable  
Augstas izturības injekcijas konsistences kompozīts



Essentia Universal  
Universāls pastas konsistences kompozīts

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND un G-aenial Universal Injectable ir GC tirdzniecības zīmes. Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ un Tetric EvoFlow Bulk Fill nav GC tirdzniecības zīmes.

### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark,  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33,  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<http://europe.gc.dental>

### GC Nordic AB

Atstovas Lietuvoje  
Žilvinas Žičkus  
Tel. +370.6524.9729  
zilvinas.zickus@gc.dental  
<https://europe.gc.dental/lt-LT>

# GC